


ZYTOLOGIE-BÜRSTEN

BÜRSTEN

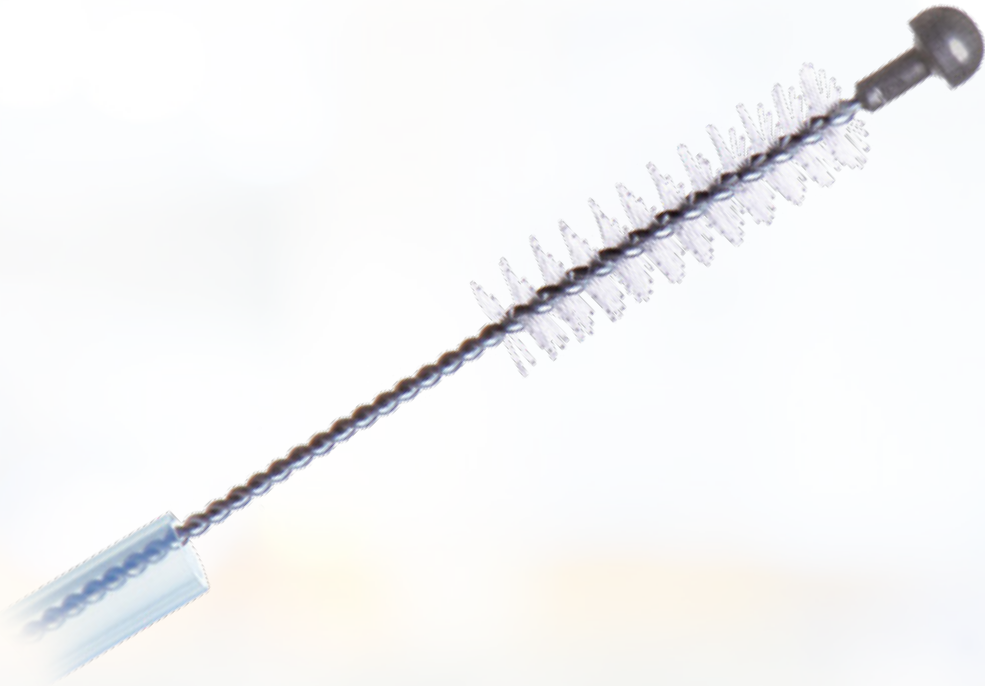

ZYTOLOGIE-BÜRSTEN


DIE LÖSUNG FÜR EINFACHE UND SICHERE ZELL-ABSTRICHE

Eine der bewährten Methoden zur Entnahme von Gewebeproben ist der Zell-Abstrich mit Zytologiebürsten. Mit einer speziell auf die klinischen Bedürfnisse ausgerichteten Reihe an Zytologiebürsten macht MICRO-TECH die Probeentnahme effizient und sicher. Die MICRO-TECH Zytologiebürste kann besonders leicht durch das Endoskop zu der gewünschten Stelle geführt und der Zyto-Abstrich

müheless entnommen werden. Die dünnen Borsten stellen dabei einen schonenden Zellabstrich sicher. Der Kunststoff-Tubus sowie die distale Kugel zum Verschluss schützen die Gewebeprobe beim Zurückziehen. Eine mögliche Verunreinigung der Probe oder gar ein Probenverlust sind ausgeschlossen.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Dünne Borsten für optimale Zellsammlung
- Mit Kunststoff-Tubus und Metallkopf zum Verschluss
- Für Endoskope mit einem Arbeitskanal-Durchmesser ab 2,0 mm
- Sterile Einzelverpackung

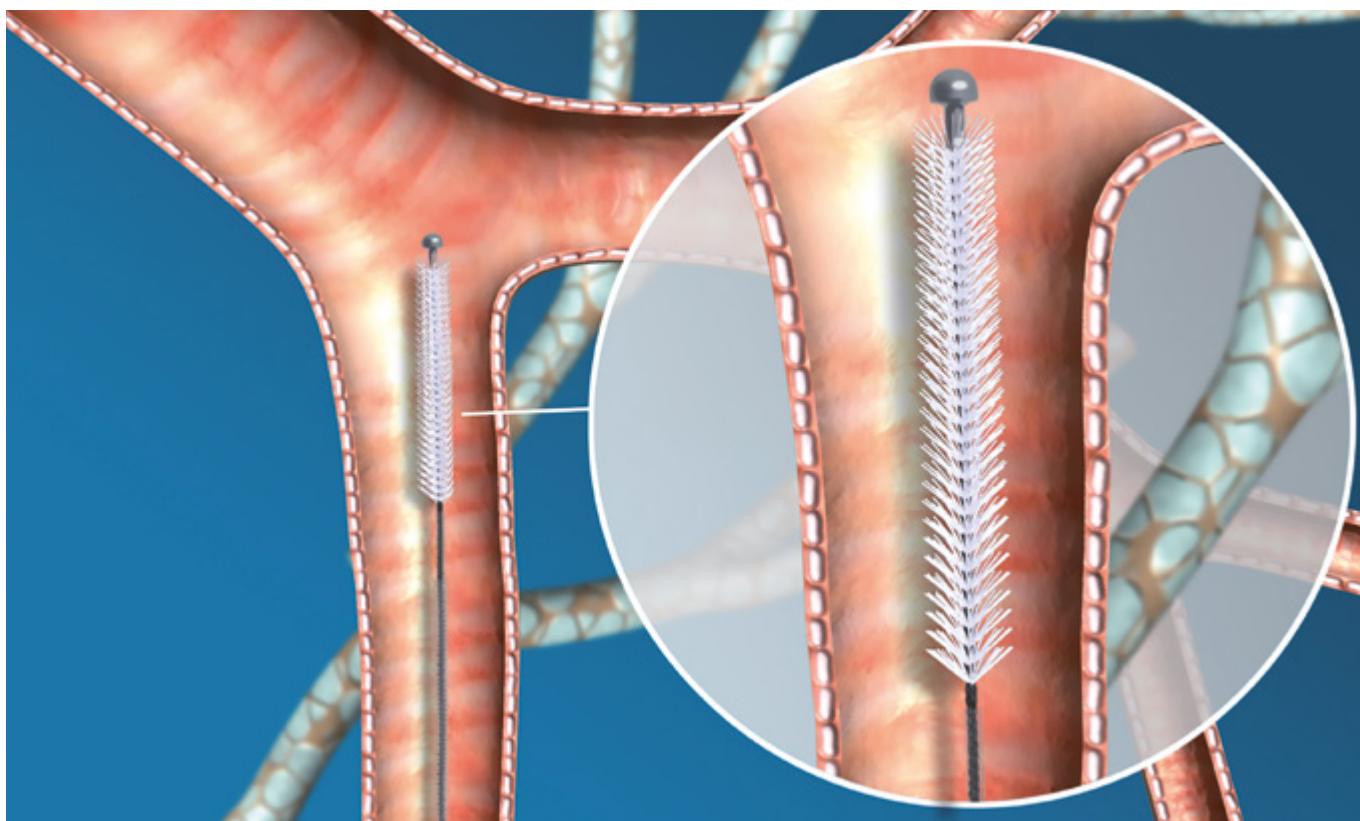

SICHERE UND KONTROLLIERTE EINFÜHRUNG

Mit den Zytologiebürsten von MICRO-TECH gelangen Sie auch an schwer erreichbare Läsionen einfach und sicher. Der ergonomisch geformte Griff bietet dem Anwender zudem einen sicheren und komfortablen Halt. Jede Bewegung wird direkt und präzise an den Bürstenkopf weitergeben.



Ergonomischer Handgriff

UMFASSENDES SORTIMENT

MICRO-TECH bietet Ihnen zahlreiche Modelle an Zytologiebürsten an, die sich für viele Anwendungsbereiche eignen und den klinischen Anforderungen entsprechen.

SPEZIFIKATIONEN

REF	Bürsten Ø mm	Länge mm	Katheter Ø mm
EINMAL-ZYTOLOGIEBÜRSTEN			
CYB-24S-12C	2,4	1200	1,8
CYB-30S-12C	3,0	1200	1,8
CYB-40S-12C	4,0	1200	1,8

Verpackungseinheit: 20 Stück

