



VOERDRADEN

EERSTE KEUZE BIJ STENTPLAATSING



VOERDRADEN

KNIKBESTENDIG, HYDROFIEL EN RADIOPAAK

Alle voerdraden zijn gemaakt van knikbestendig en torsiestijf nitinol. Dankzij de hydrofiele punt vinden de draden ook op moeilijk bereikbare plaatsen en stenoses veilig hun weg. Dit wordt ondersteund door de hoge stijfheid en

stuurbaarheid van de draad. De voerdraden kunnen dus ook worden gebruikt bij complexe stentplaatsingen. De hoge radiopaciteit van de flexibele hydrofiele punt zorgt voor een nauwkeurige plaatsing onder radiologisch zicht.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Knikbestendige nitinoldraad
- Hoge stijfheid en stuurbaarheid
- Hydrofiele, atraumatische punt
- Werklengte: tot 2600 mm
- Hoge radiopaciteit




Draad met rechte punt



Draad met J-punt

SUCCESVOL IN DE PRAKTIJK

De voerdraden kunnen zeer goed opgevoerd worden in de endoscoop dankzij hun knikbestendigheid en stijfheid. In het dagelijks gebruik werken ze uiterst prettig door hun precisie. Die wordt vooral gewaarborgd door de verliesvrije overdracht van de draai- en duwbeweging door de operatieassistent op de voerdraad. Zelfs anatomisch moeilijke passages kunnen op die manier eenvoudig worden bereikt. Voor een optimale positionering is de punt van elke draad ook uitstekend te zien op röntgenbeelden.

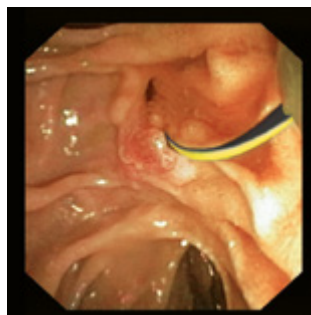

Endoscopisch beeld



Röntgenbeeld

DISPENSER VOOR EENVOUDIG GEBRUIK

De innovatieve dispenser maakt het gemakkelijk om de draad in te voeren en uit te trekken. Dankzij het compacte ontwerp is hij bijzonder handzaam en gemakkelijk in gebruik. Ook het spoelen van de draad gaat snel en gemakkelijk in de dispenser.



Dispenser Voerdraden

SPECIFICATIES

REF	Ø inches	Totale lengte mm	Lengte van de punt mm	Vorm van de tip	Configuratie	Uitvoering
HYDROSLIDE VOERDRADEN						
MTN-BM-89/26-A	0,035"	2600	65	recht	hydrofiel, radiopaak	blauw-geel
MTN-BM-89/26-A-J	0,035"	2600	65	J-vorm	hydrofiel, radiopaak	blauw-geel

Verpakkingseenheid:: 2 stuks

