




RESECTIE

SNAREN, ESD-MES, COAGULATIETANG,
INJECTIENAALD, POLIEPENVAL EN NETTEN

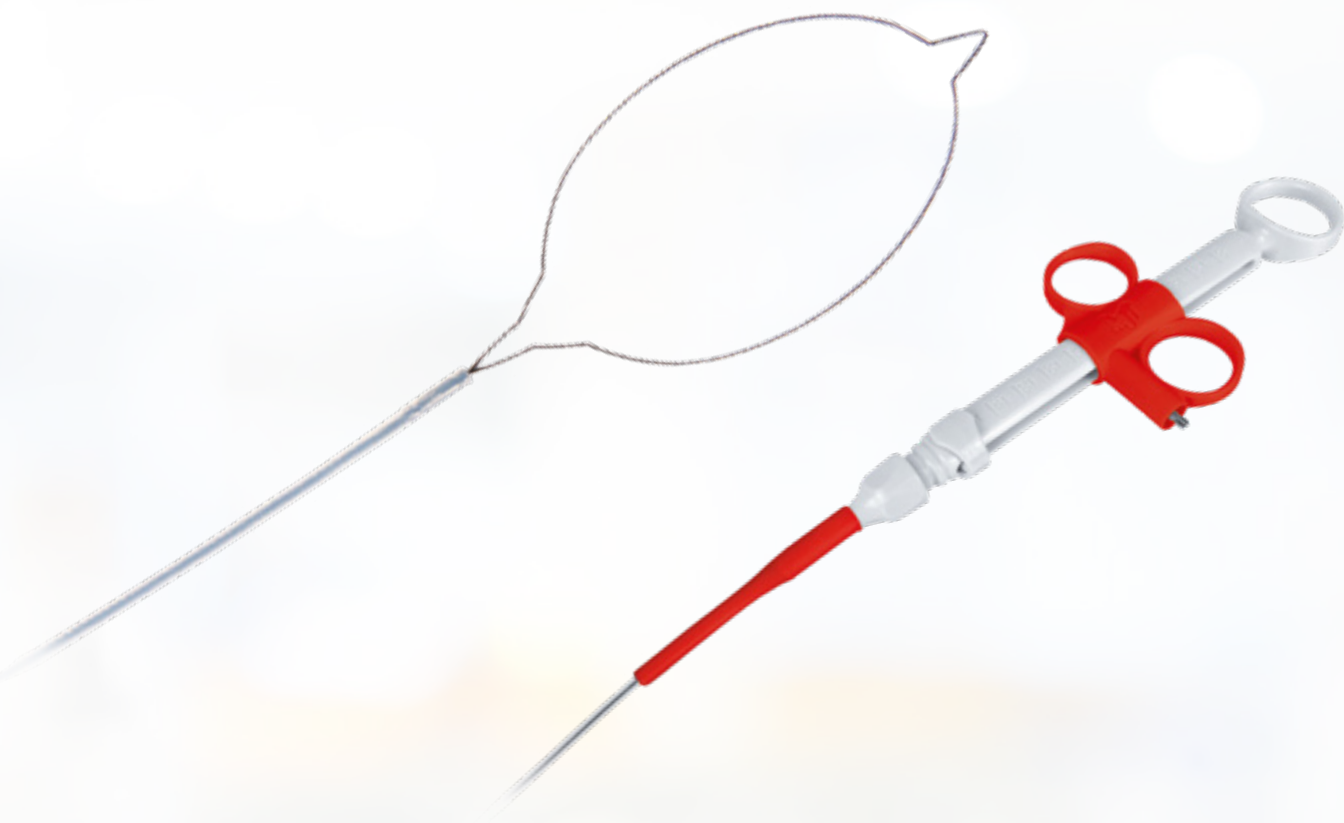

DAILYSNARE

MEER COMFORT EN BETROUWBAARHEID IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Om het verwijderen van poliepen in de dagelijkse, klinische praktijk zo efficiënt mogelijk te maken, heeft MICRO-TECH een programma van wegwerp poliepectomie-snaren ontwikkeld, die kwaliteit en economische efficiëntie perfect combineren. Elke snaar is gemaakt van een speciaal


gevlochten draad, die zich kenmerkt door een goede stuurbaarheid, hoge dimensionale stabiliteit en precieze snij-eigenschappen. De 3-rings handgreep biedt u daarbij een stevige grip en brengt elke beweging nauwkeurig over op de snaar.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Hoog werkcomfort
- Betrouwbaar en zeker
- Innovatieve HF-aansluiting
- 3-rings handgreep
- Goede snijresultaten
- Hoge dimensionale stabiliteit
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

SUCCESVOL IN DE PRAKTIJK

De speciaal gevlochten draad van de Dailysnare geeft aan de snaar de vereiste restspanning, zodat hij in elke positie goed en betrouwbaar opent en te controleren is. Dankzij de enorme dimensionale stabiliteit en goede snij-eigenschappen, is de Dailysnare een betrouwbaar instrument voor uw dagelijkse praktijk. Dankzij de nieuwe handgreep kan de snaar gemakkelijk worden geopend en gesloten, zelfs als een HF-kabel is aangesloten. De HF-kabel wordt daarbij van de hand weggehouden.

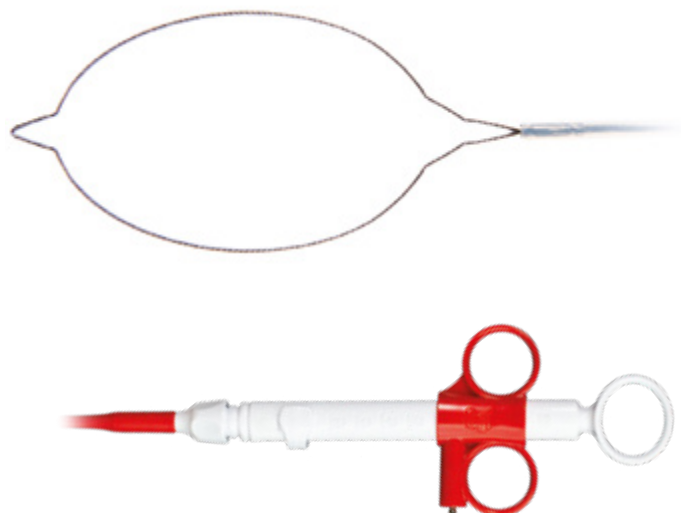

SPECIFICATIES

REF	Katheter Ø mm	Lengte mm	Snaar Ø mm	Snaarvorm
POLIEPECTOMIESNAREN DAILYSNARE VOOR EENMALIG GEBRUIK				
PFS01-01023230	2,3	2300	10	Ovaal
PFS01-01523230	2,3	2300	15	Ovaal
PFS01-02023230	2,3	2300	20	Ovaal
PFS01-02423230	2,3	2300	24	Ovaal
PFS01-03623230	2,3	2300	36	Ovaal
PFS01-12423230	2,3	2300	24	Hexagonaal
PFS01-33023230	2,3	2300	10/ 20/ 30	3 in 1 vario

Verpakkingseenheid: 10 stuks



COLDSNARE

VEILIGE RESECTIE VAN POLIEPEN ≤ 9 MM

Met de Coldsnares van MICRO-TECH heeft u een instrument, dat bijzonder geschikt is voor het koud verwijderen van poliepen ≤ 9 mm. De dunne gevlochten snijdraad met een draaddikte van 0,23 mm, is speciaal ontworpen voor koud weghalen. Ze zorgt er in combinatie met het geop-


timaliseerde snaarontwerp voor dat, kleine poliepen zeer precies en met een zuivere snede worden verwijderd. De weggesneden poliep is vrij van thermische defecten en zorgt voor een zinvolle histologische evaluatie.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Voldoet aan de richtlijnen voor poliepen ≤ 9 mm
- Speciale snijdraad
- Geoptimaliseerd snaarontwerp
- Nauwkeurig en gelijkmatig snijvlak
- Hoge mate van controle
- Ergonomische handgreep




Ergonomische handgreep

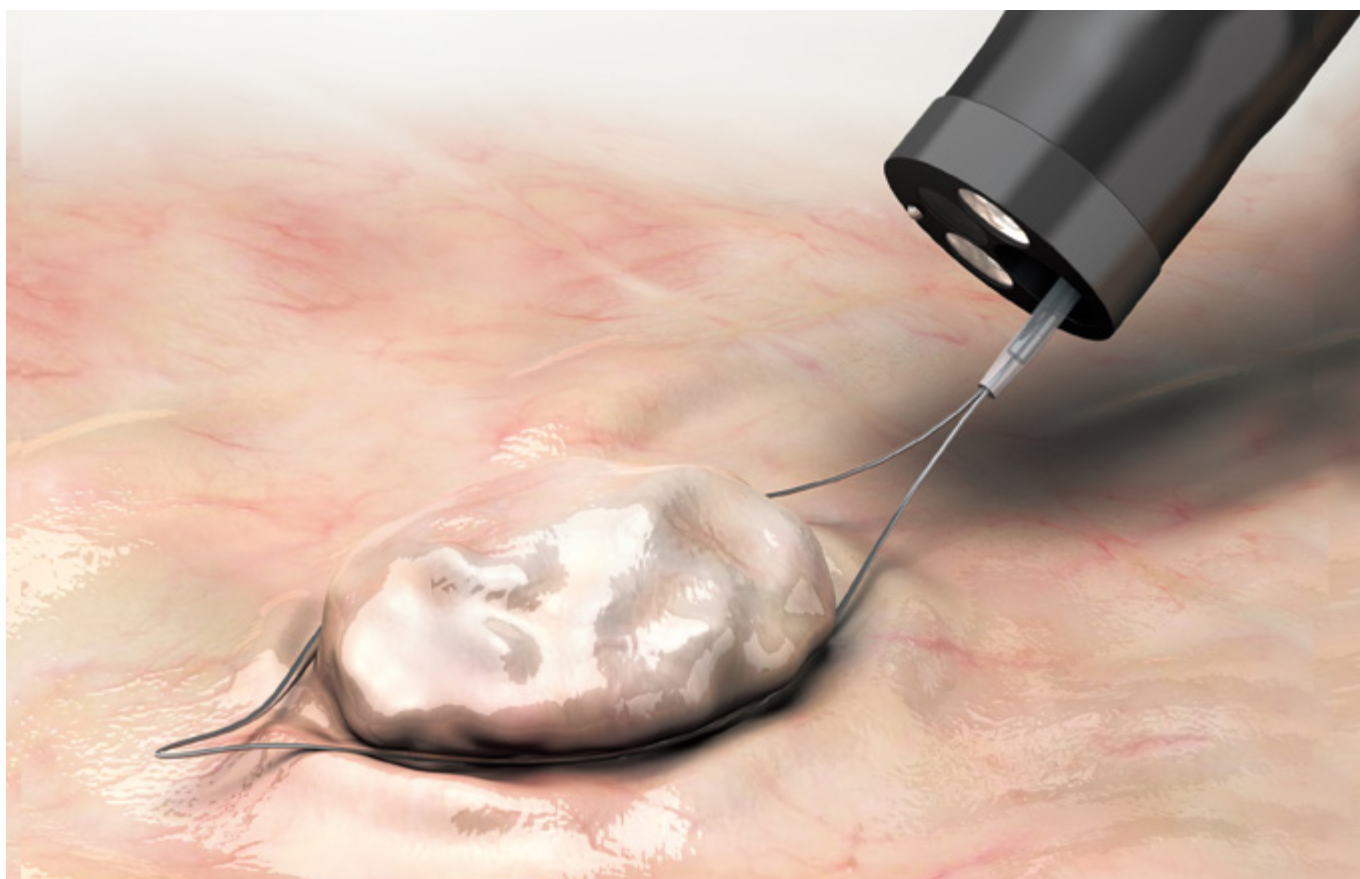

SPECIFICATIES

REF	Katheter Ø mm	Lengte mm	Snaar Ø mm	Snaarvorm	Draadsterkte mm
COLDSNARE					
CS3-11023230	2,3	2300	10	Rhombus	0,23
CS3-11523230	2,3	2300	15	Rhombus	0,23

Verpakkingseenheid: 10 stuks

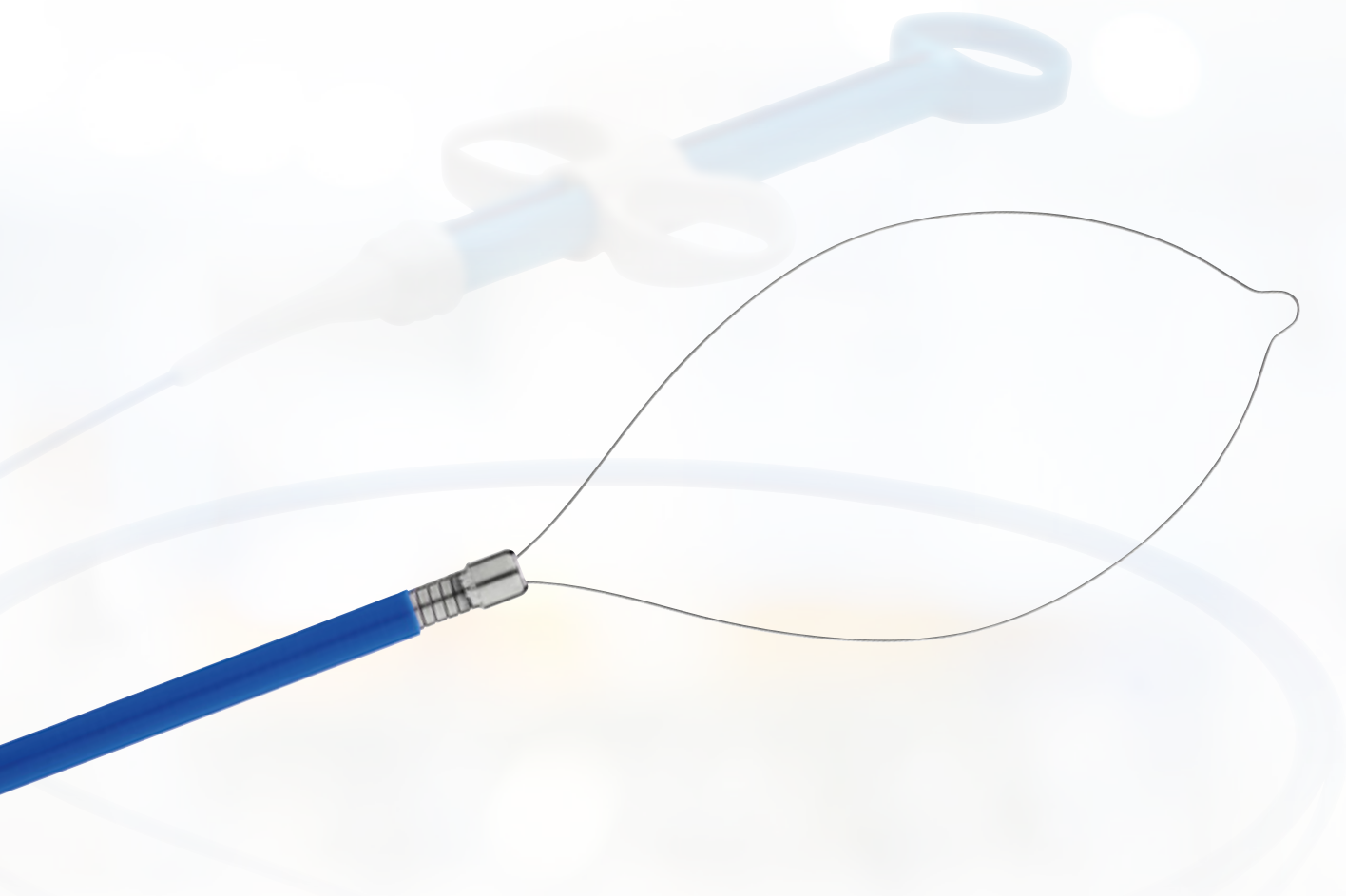

LESIONHUNTER COLDSNARE


EFFICIËNTE EN NAUWKEURIGE RESECTIE

Met de LesionHunter Coldsnares breidt MICRO-TECH zijn assortiment koude snaren uit met een vormvast model voor nauwkeurige resecties. De lis bestaat uit een roteerbaar nitinoldraad die zelfs na meerdere resecties zijn ovale vorm behoudt, waardoor een consistente grip op het weefsel wordt gegarandeerd. De bijzonder dunne


nitinoldraad van 0,18 mm snijdt soepel door het weefsel en laat de poliep achter in het resectiebed, zodat deze gemakkelijk kan worden gevonden en verwijderd. De LesionHunter Coldsnares is verkrijgbaar in drie diameters – 10, 15 en 20 mm – en biedt daarmee voor veel poliep groottes de juiste oplossing.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN


- Roteerbare, vormvaste lis voor extra duurzaamheid
- Dunne nitinoldraad voor een zuivere snede
- Spiraalvormige metalen katheter voor meer stabiliteit tijdens resectie
- Ergonomische 3-rings handgreep voor nauwkeurige controle
- Verwijderd weefsel blijft achter in het resectiebed en is gemakkelijker terug te vinden

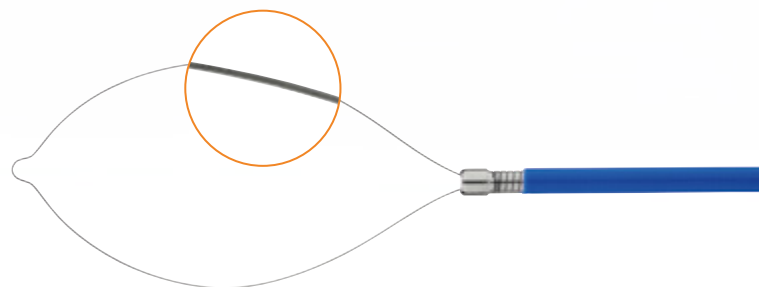


In tegenstelling tot traditioneel gevlochten koude snaren bestaat de LesionHunter uit een 0,18 mm dunne monofilament nitinoldraad.

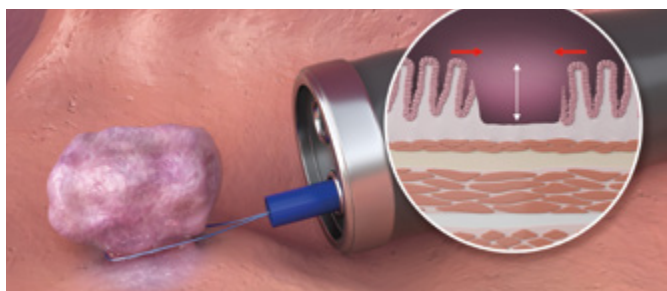

Het verwijderen van kleine poliepen met een coldsnare kan het risico op nabloedingen verminderen.

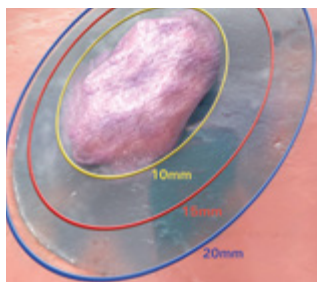


Dankzij de drie beschikbare diameters van de LesionHunter kan een lis worden gekozen die de poliep volledig omsluit. Hierdoor kan na de resectie een veilige afstand tot het gezonde weefsel rondom de resectieplaats worden bereikt.

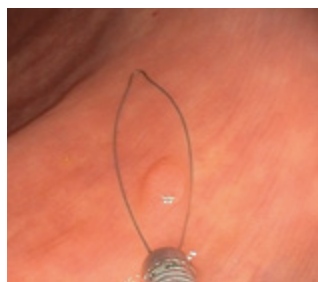

De LesionHunter Coldsnares omsluit de poliep volledig en zorgt dankzij de ultradunne monofilament nitinol-draad van 0,18 mm voor een zuivere snede.



Elke beweging van de ergonomische handgreep wordt direct overgebracht op de lis – voor nauwkeurige rotatie en zuivere sneden.

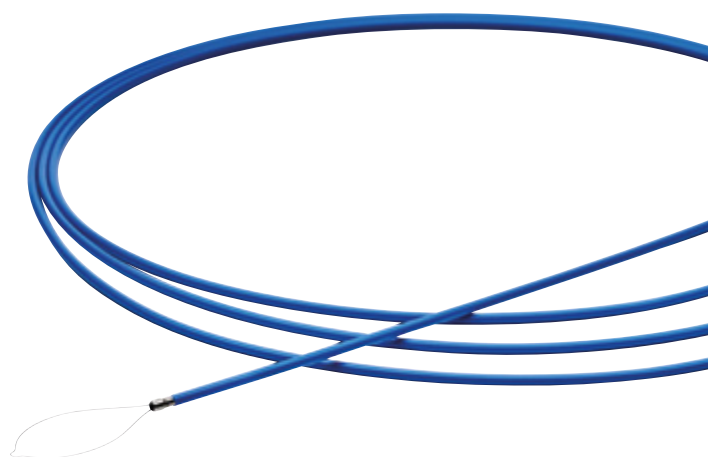

SPECIFICATIES

REF	Max. buitendiameter mm	Werklengthe mm	Snaar Ø mm	Snaarvorm	Snaardikte mm
LESIONHUNTER COLDSNARE					
CS2-21023231	≤2,5	2300	10	ovaal	0,18
CS2-21523231	≤2,5	2300	15	ovaal	0,18
CS2-22023231	≤2,5	2300	20	ovaal	0,18

Verpakkingseenheid: 10 stuks



POLIEPECTOMIESNAREN VAN BAUER MEDICAL

NAUWKEURIGE POLIEPECTOMIE EENVOUDIGER GEMAAKT

Combinatie snaren van bauer medical - altijd een goede keuze voor poliepectomie. Poliepen kunnen gemakkelijk en betrouwbaar worden verwijderd, dankzij de continue, met één hand te bedienen rotatiefunctie. Slechts een lichte draai van de pols is voldoende om de beweging nauwkeurig over te brengen op de snaar. De variabele snaar

kan tijdens het onderzoek worden ingesteld van 25 mm tot 15 mm, en heeft ook een atraumatische afgeronde kathetertip. Het uitstekende expansievermogen van de snaar, gecombineerd met bijzonder goed uitgebalanceerde coagulatie- en snij-gedrag, biedt eersteklas resultaten bij poliepectomie.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Ergonomische 3-rings handgreep
- Soepele 360° rotatie (zoals PS1-A21 en PS1-A23)
- Bij combi-snaren: variabel instelbare snaargrootte
- Optimale aanpassing aan de moeilijkste polieplocaties
- Grote expansiekracht
- Nauwkeurig coagulatie- en snijgedrag



Snaren deels en volledig uitgestrekt



Handgreep met HF-aansluiting voor exact begeleiden van de sheet

SPECIFICATIES

REF	Katheter Ø mm	Lengte mm	Snaar Ø mm	Snaarvorm	Kenmerken
BAUER POLIEPECTOMIESNAREN					
PS1-A11-10-23-220-OL	2,3	2200	10	Ovaal	Monofilament; draaibaar
PS1-A11-15-23-220-OL	2,3	2200	15	Ovaal	Monofilament; draaibaar
PS1-A11-25-23-220-OL	2,3	2200	25	Ovaal	Monofilament; draaibaar
PS1-A20-10-23-220-OL	2,3	2200	10	Ovaal	Monofilament
PS1-A20-15-23-220-OL	2,3	2200	15	Ovaal	Monofilament
PS1-A20-25-23-220-OL	2,3	2200	25	Ovaal	Monofilament
PS1-A21-15-23-220-OL	2,3	2200	15	Ovaal	Monofilament
PS1-A21-25-23-220-OL	2,3	2200	25	Ovaal	Monofilament
PS1-A22-25-23-220-OL	2,3	2200	15/25	Ovaal	Monofilament-Combi
PS1-A23-25-23-220-OL	2,3	2200	15/25	Ovaal	Monofilament-Combi; draaibaar
PS1-A30-30-23-220-OL	2,3	2200	15/30	Ovaal	Monofilament-Combi
PS1-A31-30-23-220-OL	2,3	2200	15/30	Ovaal	Monofilament-Combi; draaibaar
PS1-A30-20-23-220-OL	2,3	2200	10/20	Ovaal	Monofilament-Combi
PS1-A31-20-23-220-OL	2,3	2200	10/20	Ovaal	Monofilament-Combi; draaibaar
PS1-A50-25-23-220-OL	2,3	2200	15/25	Asymmetrisch	Monofilament-Combi
BAUER SNAREN EMR					
PS1-A61-10-23-220-OL	2,3	2200	10	Type op aanvraag-EMR	Platte draad; draaibaar
PS1-A61-15-23-220-OL	2,3	2200	15	Type op aanvraag-EMR	Platte draad; draaibaar
PS1-A61-25-23-220-OL	2,3	2200	25	Type op aanvraag-EMR	Platte draad; draaibaar
PS1-A61-30-23-220-OL	2,3	2200	30	Type op aanvraag-EMR	Platte draad; draaibaar

Verpakkingseenheid: 10 stuks



GOLDKNIFE

ELEKTROCHIRURGISCHE PRECISIE ZONDER INSTRUMENTENWISSELINGEN

De GOLDKNIFE van MICRO-TECH maakt effectieve en betrouwbare endoscopische submucosale dissecties mogelijk. Dankzij de combinatie van een waterstraal en elektrochirurgie kunnen alle stappen van de dissectie worden uitgevoerd zonder instrumentwisselingen: markering (met uitzondering van het IT-type), injectie, dissectie en stolling. De waterstraal in combinatie met elektrochirurgie creëert een submucosaal waterkussen dat op elk

moment aangepast kan worden om het onderliggende weefsel maximaal tegen thermisch en mechanisch letsel te beschermen. Met de handgreep kan het mes traploos uitgeschoven worden. De uitgebalanceerde stijfheid van de schacht maakt bovendien een precieze mes geleiding mogelijk. Er kan uit vier verschillende mespunten met verschillende snij- en coagulatie-eigenschappen worden gekozen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Waterstraal- en elektrochirurgie in één
- Markering (met uitzondering van het IT-type), injectie, dissectie en coagulatie zonder wisseling van instrument
- Opspuiten van het waterkussen mogelijk tijdens de dissectie en resectie
- 4 verschillende typen messen





Type I: Grotere bewegingsruimte, veelzijdig inzetbaar, hogere moeilijkheidsgraad



Type T: Ideaal voor resecties onder trekkracht. Betere coagulatiemogelijkheid en geoptimaliseerde snijrichting tijdens de dissectie



Type O: Halvemaanvormige tip voor maximaal coagulatie-effect



Type IT: De geïsoleerde keramische punt van 1,6 mm minimaliseert het risico op perforatie en maakt zo een veilige dissectie mogelijk.




Markering



Injectie-waterkussen



Dissectie

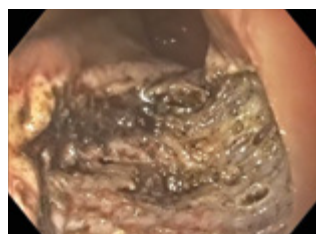

Overzicht na resectie

SPECIFICATIES

REF	Vorm van de mespunt	Totale lengte van het mes / lengte van de mespunt mm	Werklengte mm	Werkkanaal Ø mm
GOLDKNIFE-I-TYPE				
MK-I-1-165	I	1,5	1650	2,8
MK-I-1-235	I	1,5	2350	2,8
MK-I-2-165	I	2	1650	2,8
MK-I-2-235	I	2	2350	2,8
MK-I-4-165	I	4	1650	2,8
MK-I-4-235	I	4	2350	2,8
GOLDKNIFE-O-TYPE				
MK-O-1-165	O	1,5 / 0,35	1650	2,8
MK-O-1-235	O	1,5 / 0,35	2350	2,8
MK-O-2-165	O	2 / 0,35	1650	2,8
MK-O-2-235	O	2 / 0,35	2350	2,8
MK-O-4-165	O	4 / 0,35	1650	2,8
MK-O-4-235	O	4 / 0,35	2350	2,8
GOLDKNIFE-T-TYPE				
MK-T-1-165	T	1,5 / 0,35	1650	2,8
MK-T-1-235	T	1,5 / 0,35	2350	2,8
MK-T-2-165	T	2 / 0,35	1650	2,8
MK-T-2-235	T	2 / 0,35	2350	2,8
MK-T-4-165	T	4 / 0,35	1650	2,8
MK-T-4-235	T	4 / 0,35	2350	2,8
GOLDKNIFE-IT-TYPE				
MK-IT-4-235	IT	5,6	2350	2,8

Verpakkingseenheid: 1 stuk



ENSURE

DE TANG VOOR VEILIGE COAGULATIE

MICRO-TECH ENSURE coagulatie forceps is ontwikkeld om medisch specialisten te ondersteunen bij het effectief coaguleren van bloedingen tijdens interventionele endoscopische procedures. ENSURE maakt het mogelijk om de bloedvaten veilig vast te grijpen en ze met behulp van HF-stroom door te snijden of te coaguleren. Bloedingen tijdens of na een ESD kan betrouwbaar worden gestopt zonder dat het omliggende weefsel wordt aangetast. Dit wordt gewaarborgd door de zorgvuldig

gegroefde takken van de tang. Ze zorgen voor een veilige grip en voorkomen wegglijden tijdens de coagulatie. Dankzij de openingsbreedte van maximaal 6,3 mm kunnen op diverse plaatsen bloedingen betrouwbaar worden verholpen. De ergonomische handgreep zorgt voor een nauwkeurige en comfortabele bediening. Bovendien vergemakkelijkt de bidirectionele roteerbaarheid van de HF-aansluiting, het hanteren tijdens de procedure.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Voor effectieve hemostase met ESD en EMR
- Zekere houvast zonder wegglijden
- Betrouwbare rotatie
- 360° bidirectionele rotatie van de HF-aansluiting
- Openingsbreedte 6,3 mm



Ergonomische 3-rings handgreep met softgrip en 360° HF-aansluiting

SPECIFICATIES

REF	Openingsbreedte mm	Lengte mm	Cups	Buitendiameter distale punt mm	Werkkanaal Ø mm
TYPE B					
CF165-B	6,3	1650	gegroefd	$\leq 2,7$	$\geq 2,8$
CF230-B	6,3	2300	gegroefd	$\leq 2,7$	$\geq 2,8$

Verpakkingseenheid: 10 stuks



DISTALE KAPPEN

DUIDELIJK ZICHT VOOR DUIDELIJKE RESULTATEN

De 4 mm lange distale kappen zorgen voor een optimaal gezichtsveld voor therapeutische interventies en diagnostiek. Het transparante materiaal zorgt voor een duidelijk zicht op het weefsel. Daarnaast is het materiaal zacht zodat het omringend of aangetast weefsel wordt gespaard en is

het uitstekend geschikt om slijmvliesplooiën glad te strijken. De distale kap wordt eenvoudig over de distale tip van de endoscoop geschoven en heeft een stevige grip. De afstand tussen de endoscoop en het slijmvlies maakt de distale kap ideaal voor een reeks endoscopische procedures.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Geoptimaliseerd zicht door transparante kap
- Zijopening voor drukvereffening en ook voor het afvloeien van vloeistoffen
- Vergemakkelijkt de detectie
- Veilige grip aan de endoscoop
- Atraumatische, distale kaprand




VEELZIJDIG INZETBAAR

- ESD
- EMR
- Zenker
- Hemostase
- Colonoscopieën

SPECIFICATIES

REF	Vorm	Lengte mm	Distale kap Ø in mm
DISTALE KAPPEN			
XT-DL-092-40	recht	4	9,0 – 9,2
XT-DL-098-40	recht	4	9,6 – 9,8
XT-DL-099-40	recht	4	9,7 – 10,1
XT-DL-115-40	recht	4	11,3 – 11,7
XT-DL-122-40	recht	4	12,0 – 12,4
XT-DL-128-40	recht	4	12,6 – 13,0
XT-DL-132-40	recht	4	13,0 – 13,4

Verpakkingseenheid: 10 stuks

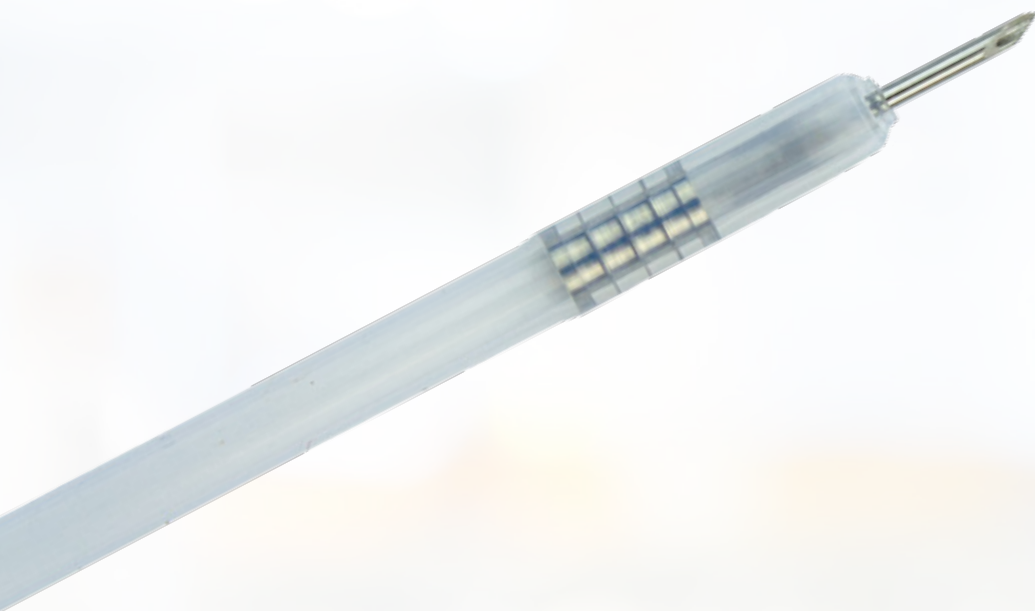

INJECTIENAALD

BETROUWBAAR EN VEILIG

De wegwerp-injectienaald van MICRO-TECH vergemakkelijkt de dagelijkse klinische routine met een ergonomische handgreep en een bijzonder scherpe naald. Het antislip-ontwerp zorgt voor comfortabele bediening met slechts

één hand. Voor nog preciezere puncties kan de naald in verschillende fasen inhaken. Op het moment dat de naald wordt ontgrendeld klikt deze volledig terug in de katheter, om schade aan het werkkanaal te voorkomen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Ergonomische en antislip handgreep
- Verstelbaar drukkussen
- Automatische naaldinvoer
- Zachte atraumatische siliconen tip
- Naald met extreem scherpe punt
- Verschillende naalddiameters
- LL spuit aansluiting



Naald volledig ingetrokken




Handig ergonomisch ontwerp

SPECIFICATIES

REF	Lengte van de naald mm	Naald Ø	Werkkanaal Ø mm	Lengte mm
INJECTIENAALD – POLIEPECTOMIE /EMR				
IN12-195232302	5	19 G = 0,9 mm	2,8	2300
IN12-225232302	5	22 G = 0,7 mm	2,8	2300
IN12-255232302	5	25 G = 0,5 mm	2,8	2300
INJECTIENAALD – ESD				
IN12-224232302	4	22 G = 0,7 mm	2,8	2300
IN12-254232302	4	25 G = 0,5 mm	2,8	2300

Verpakkingseenheid: 10 stuks

Ook verkrijgbaar in andere versies

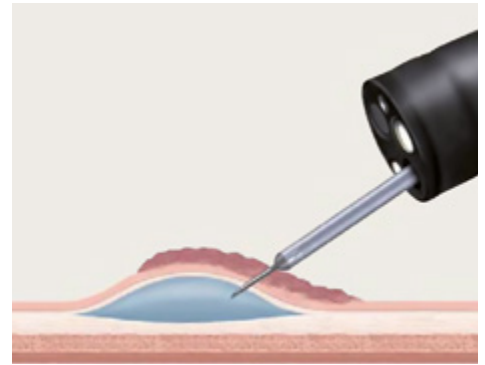

POLIEPENVAL

MET VIER KAMERS

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Vier afzonderlijke genummerde kamers in een transparante box
- Flexibele verbindingsslangen
- Nauwkeurige toewijzing van monsters
- Veilige verbinding met endoscoop en afzuiging



SPECIFICATIES

REF	Omschrijving
POLIEPENVAL	
BBP-50	Poliepenval met 4 verzamelkamers



PROTRAP LUMA

VOOR MEER GEBRUIKERSGEMAK BIJ POLIEPECTOMIE

Het opvangen van poliepen groter dan 1 mm is bijzonder eenvoudig en veilig met de inline-poliepenval van MICRO-TECH. Het unieke ontwerp maakt contactloze specimen verwijdering mogelijk en voorkomt beschadiging van de poliep. De verwijderde poliep wordt in

de specimen tray opgevangen en kan in detail worden bekeken door het ingebouwde vergrootglas. Om meerdere specimen te nemen kan de specimen tray snellen eenvoudig worden verwisseld zonder de zuigkracht te verminderen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Uitneembare specimen tray
- Vergrootglasvenster
- Ergonomisch design
- Gemakkelijke hantering
- Strakke sluiting voor veilige afzuiging
- Lichtstaaf verbetert de zichtbaarheid van poliepen



ProTrap Luma bestaat uit een slang, behuizing, specimen tray en lichtstaafje



De specimen trays vangen de poliepen op, zijn eenvoudig uitwisselbaar en passen in een weefselpotje

SPECIFICATIES

REF	Omschrijving	Verpakkingseenheid
PROTRAP LUMA		
BBPA00001	ProTrap Luma In-Line Poliepenval	25 stuks/doos
BBPA10001	ProTrap Luma Specimen Tray	50 stuks/doos



VANGNETTEN

VEILIG VERWIJDEREN VAN LICHAAMSVREEMDE ZAKEN EN POLIEPEN

Het MT-net is ontworpen voor het verwijderen van poliepen en lichaamsvreemde zaken en maakt het mogelijk om weefselmonsters op een betrouwbare wijze weg te nemen. Het net zelf bestaat uit een versterkt draadmateri-

aal, dat zorgt voor extra zekerheid tijdens het wegnemen. De unieke dimensionele stabiliteit en de grote opening maken het gemakkelijker om over meerdere doorgangen heen te werken.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Groot vangnet
- Hoogwaardige vormgeving
- Comfortabele 3-rings handgreep
- Makkelijk en exact te openen



Vormstabiel MT-net

SPECIFICATIES

REF	Ø Net mm	Snaarvorm	Werklengthe mm	Ø Werkkanaal min. mm
MT-NET				
NT-E-30/23-P	30	Ovaal	2300	2,8
NT-E-30/16-P	30	Ovaal	1600	2,8

Verpakkingseenheid: 10 stuks

NOTITIES

A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small, evenly spaced dots.

A large grid of small dots covering the majority of the page, intended for technical drawing or notes.

