



INJEKTIONSNADEL


WO ERGONOMIE AUF ZUVERLÄSSIGKEIT TRIFFT

Die Einweg-Injektionsnadel von MICRO-TECH verbessert die klinische Praxis dank ihres ergonomischen Griffs und ihrer verbesserten Nadelschärfe. Der automatische Griff im „Stiftedesign“ ermöglicht die Einhandbedienung. Für noch präzisere Punktionen verfügt die Nadel über verschiedene Steifigkeitsgrade, die stufenlos eingestellt werden können.

Wenn die Nadel freigelegt ist, rastet der Quick-Release Button die Nadel wieder in den Katheter ein, um eine Beschädigung des Arbeitskanals zu vermeiden. Der patentierte Rastmechanismus gibt ein akustisches Signal, wenn die Nadel zurückgezogen ist, und sorgt so für eine effektive Kommunikation zwischen Arzt und Pflegepersonal.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Ergonomischer Griff für Einhandbedienung
- Patentierter Ratschenmechanismus mit akustischer Bestätigung
- Einstellbare Härtegrade
- Quick-Release Button für sicheres Zurückziehen der Nadel
- Verbesserte Nadelschärfe für präzises Einstechen
- Verschiedene Nadeldurchmesser und -längen
- Einfache Befestigung über den sicheren Luer-Lock-Anschluss

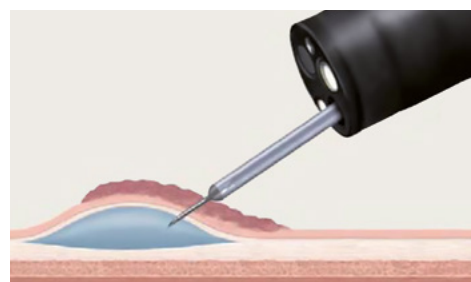



Nadel eingefahren



Nadel ausgefahren



SPEZIFIKATIONEN

REF	Nadellänge mm	Nadel Ø	Arbeitskanal Ø mm	Länge mm
INJEKTIONSNADELN – POLYPEKTOMIE /EMR				
IN12-195232302	5	19 G = 1,1 mm	2,8	2300
IN12-225232302	5	22 G = 0,7 mm	2,8	2300
IN12-255232302	5	25 G = 0,5 mm	2,8	2300
INJEKTIONSNADELN – ESD				
IN12-224232302	4	22 G = 0,7 mm	2,8	2300
IN12-254232302	4	25 G = 0,5 mm	2,8	2300

Verpackungseinheit: 10 Stück