


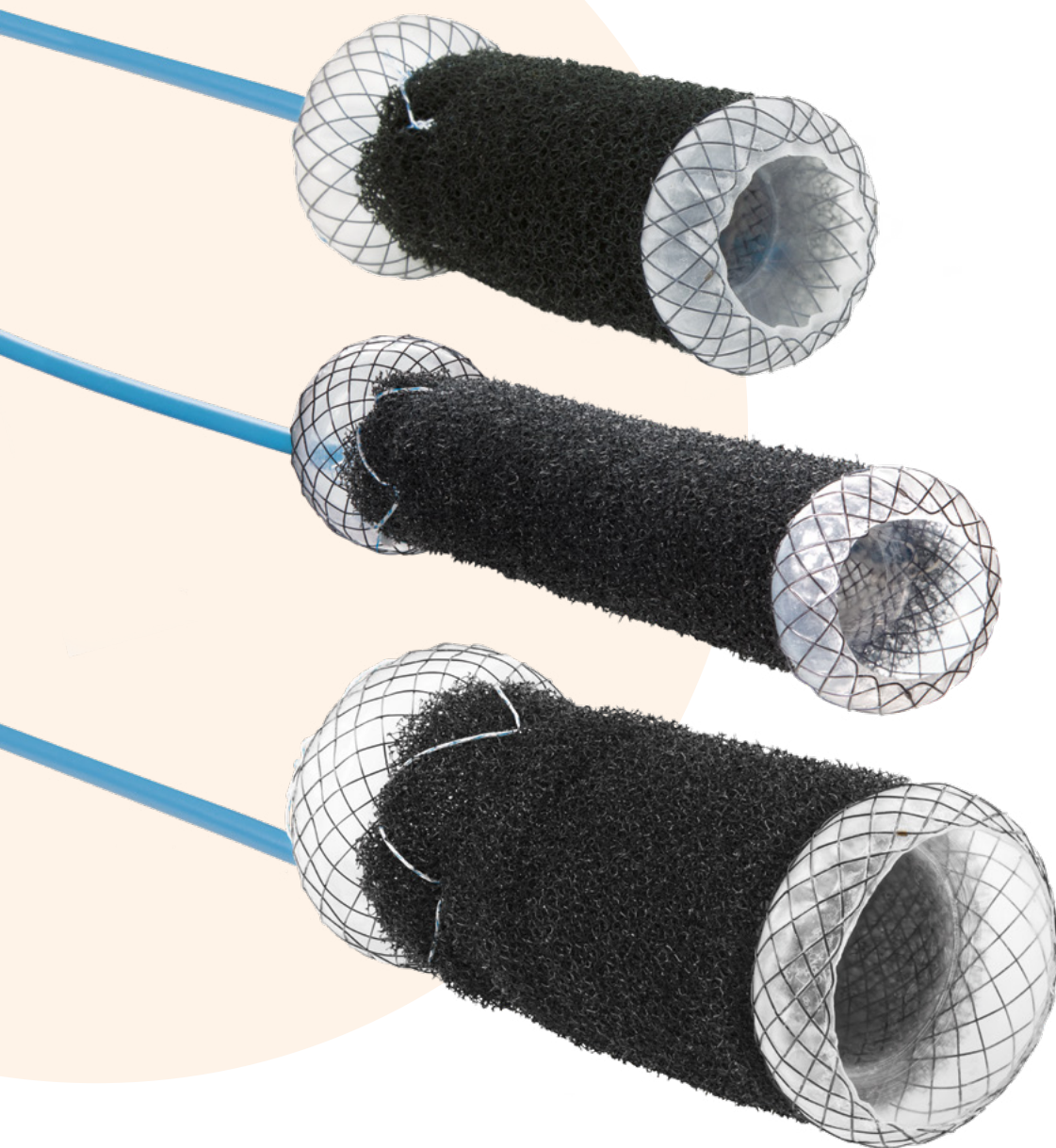

VAC STENT GI

DE 2-IN-1 OPLOSSING VOOR EFFECTIEVE BEHANDELING
IN DE SLOKDARM EN DE DIKKE DARM

EFFECTIEVE BEHANDELING VAN LEKKAGES EN ANASTOMOSE INSUFFICIËNTIES

De VacStent GI™ combineert de voordelen van een volledig gecoverde stent met het effect van een drainagespons. De innovatieve 2-in-1 oplossing is zowel als oesophagus en als colon variant beschikbaar.

De hoge positiestabiliteit zorgt voor een betrouwbare behandeling, zelfs bij natuurlijke peristaltiek. Doordat de wondholte goed is afgedekt kan voedsel of stoelgang zonder problemen passeren. De spons zorgt voor continue drainage en ondersteunt de vorming van granulatieweefsel dankzij het vacuümeffect.



VAC STENT GI


- Voor lekkages tot 30 mm en tot 80 mm met de XL versie
- Open doorgang, dus geen voedingssonde nodig

MEER
INFORMATIE



VAC STENT GI COLON

- Zorgt voor een continu lumen
- Hoge positionele stabiliteit, zelfs bij natuurlijke peristaltiek
- Voor lekkages en anastomose insufficiënties tot 40 mm
- Minimaal invasieve behandeling

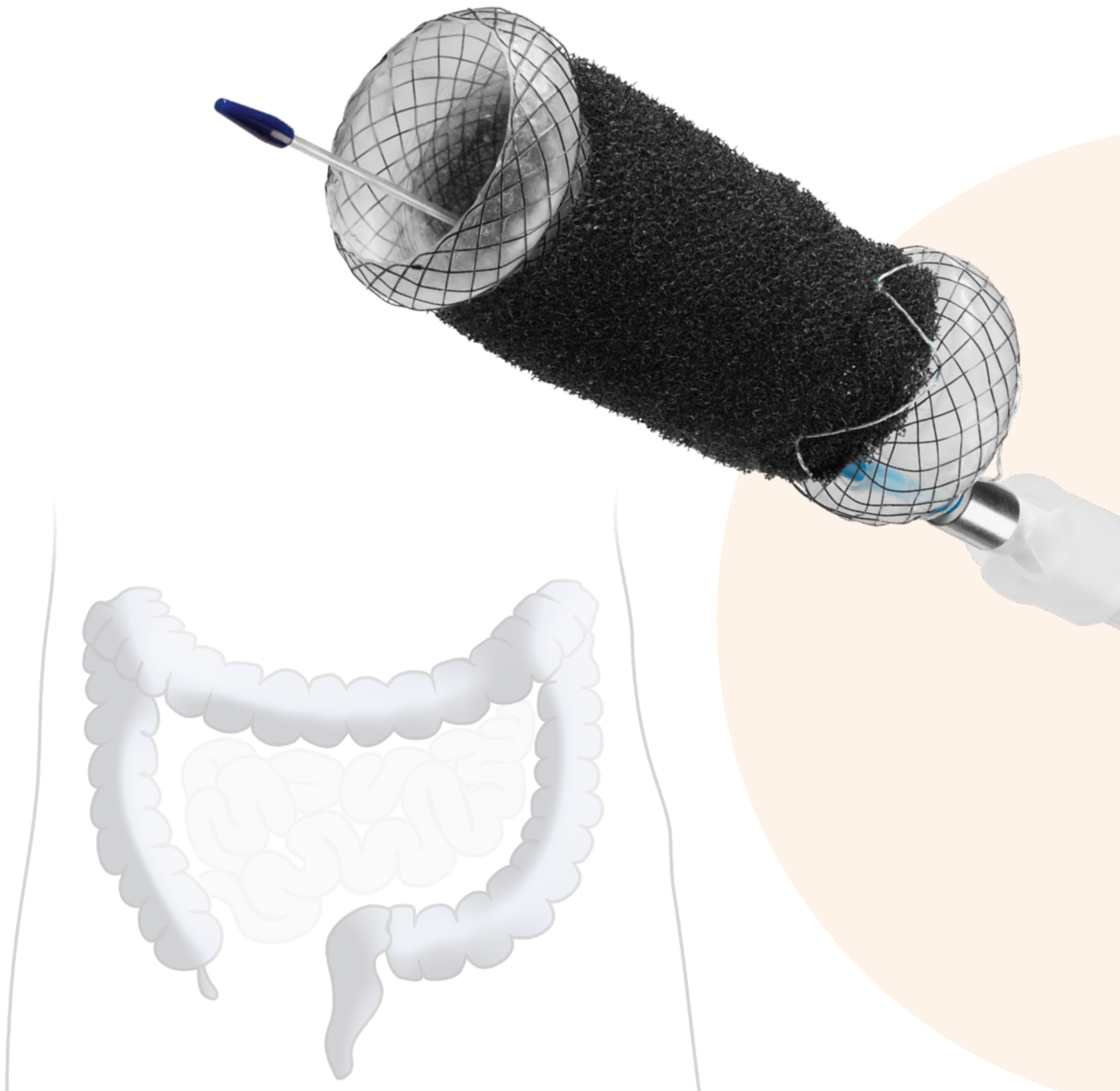

MEER
INFORMATIE



SPECIFICATIES

REF	Ø tulp mm	Ø stent mm	Totale lengte van de stent mm	Lengte van de spons mm	Covering
VACSTENT GI					
00003820	28	14	70	50	volledig
VACSTENT GI XL					
00004229	25	12	120	100	volledig

Verpakkingseenheid: 1 stuk

	Ø distale uiteinde/ introductiesysteem mm	Werklengte mm	Voerdraad inch	RM*
INTRODUCTIESYSTEEM				
	14/11	1000	0,035	2

*RM – radiopake markeringen

REF	Ø tulp mm	Ø stent mm	Totale lengte van de stent mm	Lengte van de spons mm	Covering
VACSTENT GI COLON					
00004230	36	24	80	60	volledig

Verpakkingseenheid: 1 stuk

Let op: De anastomose insufficiëntie moet ten minste 5 cm proximaal van de linea dentata gelokaliseerd zijn.

	Ø distale uiteinde/ introductiesysteem mm	Werklengte mm	Voerdraad inch	RM*
INTRODUCTIESYSTEEM				
	14/11,85	1000	0,035	2

*RM – radiopake markeringen

VacStent GI™ is een product van VAC Stent GmbH. Distributie door MICRO-TECH Europe GmbH.